

FORMULÁRIO DETECTOR DIGITAL (VENU)

(FORM 15-03 REV03)



PRÉ-REQUISITO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO
DETECTOR DIGITAL (VENU) (FORM 15-03 REV03)

As informações contidas neste documento serão levadas em consideração para agendamento da entrega e programação da instalação do seu equipamento.

Por favor, enviar este documento devidamente preenchido para o seguinte endereço de e-mail: projetos@imexmedical.com.br, aos cuidados do responsável pelo Site Planning.

O cliente arcará com as despesas decorrentes do reagendamento da instalação e/ou treinamento por não atendimento dos pré-requisitos apresentados neste documento.

Preencher o quadro abaixo com informações completas do local de instalação:

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO

ANDAR:

TELEFONE:

CIDADE / UF

CEP:

ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO NÃO FORNECIDOS PELA VENDEDORA

CONDIÇÕES FÍSICAS E ELÉTRICAS
(assinale os itens cumpridos)

1	Tomada padrão nacional (ABNT) com aterramento conforme NBR5410 - para ligação do nobreak do computador	☐
2	Tomada padrão nacional (ABNT) com aterramento conforme NBR5410 - para ligação da Control Box ⁽¹⁾	☐
3	Nobreak senoidal, online, dupla conversão, (mín. linha interativa) com potência de 1000W reais, tensão 110V ou 220V – pelo menos duas tomadas de saída, uma para ligar ao gabinete (CPU) e outra saída para ligar ao monitor.	☐
4	Bancada alta para acomodar o computador ⁽²⁾ ao lado do painel de comando do RX (mín. 700x400mm)	☐
5	Ponto de rede Gigabit 10/100/1000 próximo ao computador para envio das imagens à DRY, ao PACS e Busca Worklist (IP fixo ⁽³⁾), com acesso a internet para manutenção ⁽⁴⁾	☐
6	Canaleta de sobrepor (mín. 30x10mm) com tampa removível e conforme o comprimento disposto em layout	☐
7	Sala de Raios-x climatizada	☐
8	Croqui ⁽⁵⁾ da sala enviado a Imex Medical	☐

9 Vídeo 360° do ambiente preparado demonstrando todos os itens acima

☐

-
- (1) A *control box* acompanha a placa detectora.
 - (2) Mouse, teclado, monitor. Deverá ser feita uma base para proteger a CPU (medidas da CPU 100x300x350mm LxAxP – a mesma pode ser posicionada deitada A x L x P)
 - (3) O IP fixo é necessário quando houver necessidade de comunicação com DRY, PACS ou Busca Worklist.
 - (4) O acesso à internet é recomendado para acesso remoto.
 - (5) Desenho das salas de exames e comando com as medidas das paredes, portas, bem como suas localizações, inclusive de pontos de energia e rede (TI). Após receber o desenho da sala, encaminharemos planta sugestiva que deverá ser aprovada pelo cliente e devolvida a Imex Medical assinada e digitalizada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- As grades compatíveis com os detectores Imex normalmente são as de alta resolução, como os modelos de 215 e 103 linhas (preferencialmente marca JPI). Outros modelos, de baixa resolução, poderão ser compatíveis, mas não é possível garantir a qualidade de imagem (alta definição) proposta pelo detector e também que não ocorra o efeito gradeamento (artefatos) ou linhas. Portanto, terão que ser testadas no dia da instalação;
- Os detectores Imex possuem um software de supressão de grade, utilizado automaticamente logo após a aquisição da imagem. Este recurso atuará também em grades de baixa resolução, entretanto poderá não apresentar o mesmo efeito, neste caso, a substituição das grades é recomendada;
- Nos casos de equipamentos que já foram realizadas demonstrações, deve-se considerar a qualidade das imagens pré-aprovadas.

EM QUAL EQUIPAMENTO DE RAIOS-X SERÁ UTILIZADO O DETECTOR?

MARCA:

MODELO:

NÚMERO DE LINHAS DE GRADE:

OSCILANTE: ☐ **OU FIXA:** ☐

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVEM SER DISPONIBILIZADAS PELO PROFISSIONAL DE TI LOCAL

IP:

**INFORMAÇÕES PARA COLOCAR NO
SISTEMA DO DETECTOR**

Máscara de sub-rede:

Gateway padrão:

Estas informações são necessárias para
este equipamento realizar a
comunicação na rede da clínica / hospital

DNS preferencial:

DNS alternativo:

		AeTitle:
		PORTA: 104
O EQUIPAMENTO SERÁ CONECTADO A UMA IMPRESSORA DICOM?	MARCA:	
	MODELO:	
☐ NÃO ☐ SIM	AeTitle:	
	IP:	
	PORTA:	
O EQUIPAMENTO SERÁ CONECTADO A UM SISTEMA PACS?	MARCA:	
	MODELO:	
☐ NÃO ☐ SIM	AeTitle:	
	IP:	
	PORTA:	
O EQUIPAMENTO SERÁ CONECTADO A UM WORKLIST?	AeTitle:	
	IP:	
	PORTA:	
	CÓD WLIST DESCRIPTION ⁽⁶⁾ :	
(6) Para integrar descrição do exame é necessário informar qual o código Wlist Description que o sistema recebe e envia. Ex.: STUDYIDDESCRIPTION, STUDYDESCRIPTION...		


ATENÇÃO

Alguns sistemas PACS e Worklist possuem chaveamento para inserir novas modalidades, portanto é imprescindível que esta verificação seja feita pelo cliente antes da data de instalação do equipamento. Solicitamos ainda que o detector seja cadastrado previamente nesses sistemas, utilizando as informações abaixo:


MODALIDADE:	CR ☐ ou DX ☐
AeTitle:	IMEXDR (ou outro fornecido pelo cliente)
IP:	Da rede do cliente
PORTA:	104

DIMENSÕES DO DETECTOR


(Venu 1717)

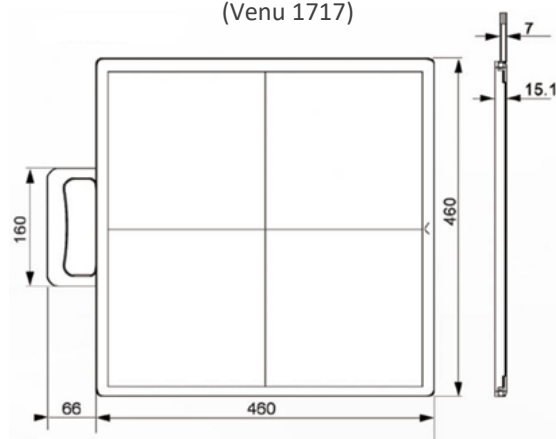


SUGESTÃO DE DISPOSIÇÃO DO COMPUTADOR NA SALA DE RAIOS-X

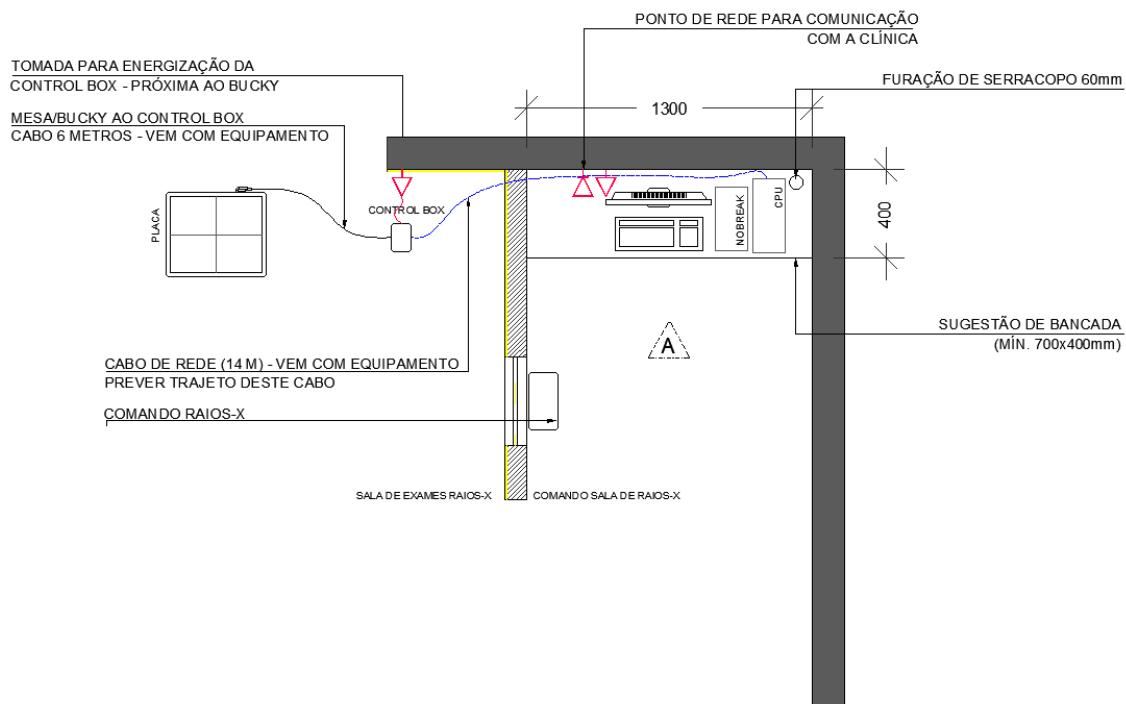

PLANTA BAIXA

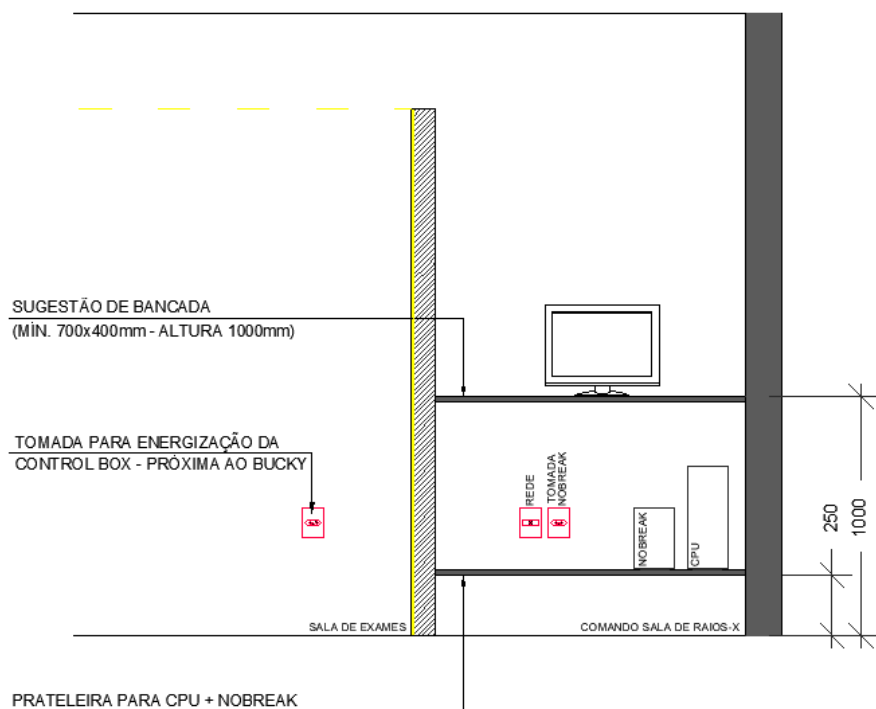

VISTA A

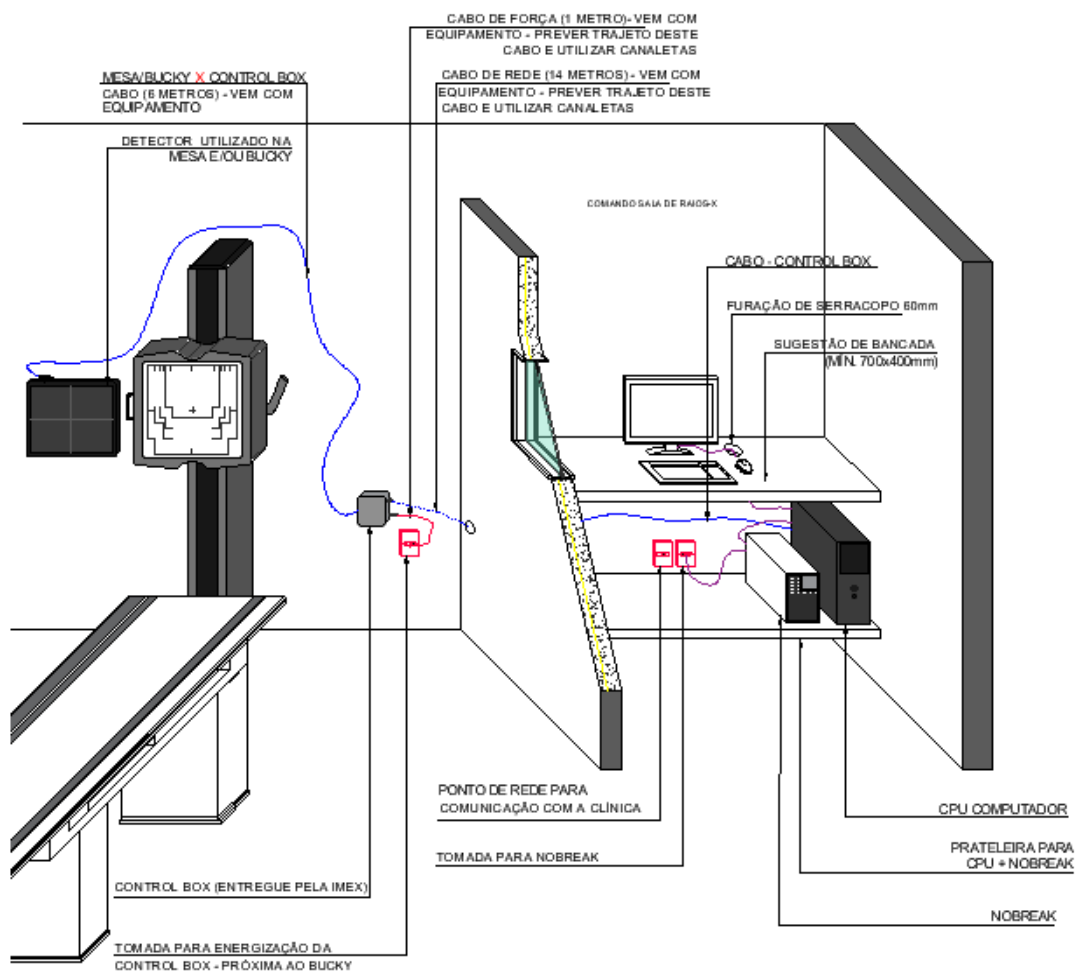

PERSPECTIVA

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

Campo disponível ao cliente para o acréscimo de informações que se fizerem necessárias:

Declaro estar ciente e de pleno acordo com as informações contidas neste documento:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

DATA